


BÜRETLER - "schilling" - "class AS"

- Otomatik "Schilling" büretler, hızlı titrasyon sağlayan ve klasik otomatik büretlere ekonomik bir alternatif oluşturan portatif büretlerdir.
- Özellikle laboratuvar dışı çalışmalarda tercih edilirler.
- Alternatif 2 ürün:
 - mavi skalalı şeffaf büretler
 - beyaz skalalı amber büretler
- Otomatik "Schilling" büret sistemi, büret borusu, vanalı büret musluğu, polietilen büret şişesi ve özel büret standından oluşur.
- 10 ml hacimli otomatik büretler 500 ml'lik büret şişesi ile, 25 ve 50 ml'lik büretler ise 1000 ml'lik büret şişesi ile teslim edilirler.
- Özellikle kırılma riskinin olduğu analizlerde kullanıma uygundur.
- Şişeye bastırılarak hızlı dolum yapılabilir ve vanalı musluğu sayesinde hızlı titrasyon sağlanır.
- Şeffaf büretler şelbah bantlı olarak, amber büretler şelbah bantsız olarak üretilirler.
- Şeffaf büretler üzerindeki yazı ve baskılarda mavi boya, amber büretler üzerindeki yazı ve baskılarda beyaz boya kullanılmaktadır.
- Diğer teknik özellikleri diğer büret tipleri ile aynıdır.

şeffaf şelbah bantlı	amber şelbah bantsız	hacim	taksimat	ambalaj adeđi
020.03.010	020.05.010	10 ml	0.05 ml	1 adet
020.03.025	020.05.025	25 ml	0.10 ml	1 adet
020.03.050	020.05.050	50 ml	0.10 ml	1 adet

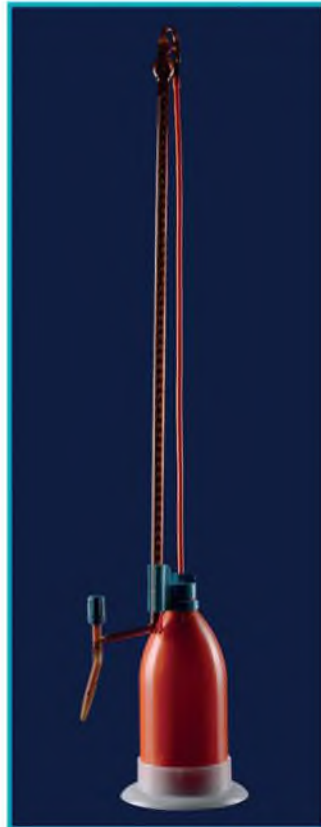

Vanalı musluklar doğal yapısı gereği kaygan olan **PTFE**'den üretilirler. Vanalı muslukların özel konik uçları, titrasyon işleminde sıvı çıkışının çok hassas olarak kontrol edilmesine olanak sağlar. Konik uç formu, musluk kapatıldığında kesin sızdırmazlık sağlar.

